


# SEBAC

16 avenue des Louvresses  
92230 Gennevilliers  
Tel 01 41 47 56 56 Fax 01 41  
47 56 57  
[contact@sebac.com](mailto:contact@sebac.com)  
[www.sebac.com](http://www.sebac.com)

## Recommandations simplifiées pour l'utilisation du McGRATH® série 5

Avant chaque utilisation s'assurer que la batterie soit neuve ou entièrement chargée.

Préformer la sonde endotrachéale avec un stylet afin d'obtenir la même angulation que la lame du McGrath (55 à 70°).

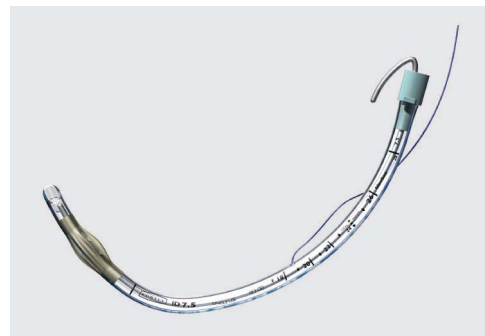

### Étape 1


Lors de l'introduction du McGrath, commencer par regarder la bouche du patient afin de s'assurer que la lame réglable soit bien positionnée de façon médiane par rapport à la langue.

### Étape 2

Regarder dorénavant l'écran et relever délicatement l'extrémité de la lame afin de visualiser comme représentés sur la photo, l'épiglotte et l'ouverture glottique. Maintenir la position.

Note 1 : L'extrémité de la lame vient se loger dans la vallecule

Note 2 : Pivoter l'écran de haut en bas pour augmenter le confort et garantir une visualisation optimale.

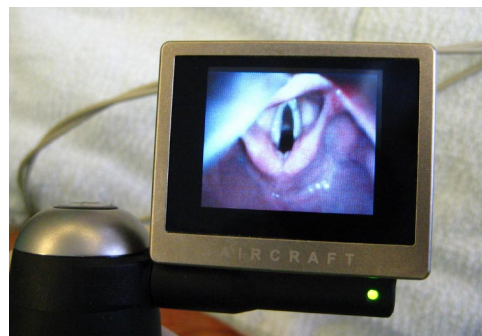

## Étape 3

Regarder la bouche du patient et introduire délicatement la sonde d'intubation préformée jusqu'à l'extrémité de la lame du McGrath

## Étape 4

Regarder directement l'écran pour accomplir l'intubation.

Note 3 : Certaines manipulations de la sonde endotra-chéale de type rotation ou autre peuvent s'assurer nécessaire pour la diriger au milieu des cordes vocales.

## Étape 5

Enlever impérativement le stylet avant de franchir les cordes vocales. De même, certaines manipulations peuvent s'avérer nécessaire pour progresser au niveau trachéal.

Note 4 : Ne jamais descendre trop bas l'extrémité de la lame du McGrath sous peine de boucher la glotte ou de voir arriver l'extrémité de la sonde tardivement empêchant toute éventuelle manipulation pour corriger la trajectoire.

**Les recommandations simplifiées ne remplacent pas le mode d'emploi livré avec chaque vidéo laryngoscope McGrath que tout utilisateur se doit de connaître.**

